

Knipgids

Ontwikkeld door verpleegkundigen voor
verpleegkundigen



Biatain® Silicone Non-Border

Ontwikkeld door verpleegkundigen voor verpleegkundigen

Deze knipgids werd ontwikkeld om u te ondersteunen bij het gebruik van Biatain® Silicone Non-Border en om u te helpen uw patiënten een optimale behandeling te geven. De verschillende usecases zijn gebaseerd op de klinische en praktische ervaring van wondverpleegkundigen die hun kennis met ons hebben gedeeld. De gids bevat diverse voorbeelden van hoe het product kan worden geknipt om wonden te behandelen op plaatsen waar aanbrengen moeilijk zou kunnen zijn. Alle voorbeelden die gegeven worden zijn bedoeld als algemene leidraad en er wordt aangeraden altijd de maat van het product te kiezen en het zo te knippen zodat het de individuele patiënt past.


Biatain Silicone Non-Border is een steriel polyurethaan single use schuimverband met een zachte siliconen kleeflaag. Voor de bevestiging is een secundair verband nodig, dat in deze gids niet wordt getoond. Het product is ook geschikt voor gebruik in combinatie met compressietherapie. Bedek het volledige product niet met een occlusief secundair verband.

Raadpleeg voor gebruik altijd de bijgeleverde gebruiksaanwijzing en behandel de wond volgens de plaatselijke richtlijnen.

Inhoudsopgave

Productoverzicht	4
Tips voor het aanbrengen.....	5
Voeten en benen	6-15
Handen en armen	16-25
Thorax	26-27
Hoofd en nek	28-30

Productoverzicht

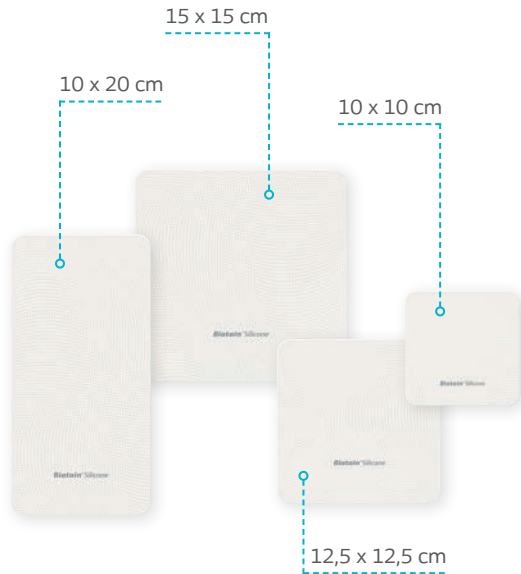

Biatain Silicone Non-Border

Artikelcode	Afmetingen in cm	Eenheden per doos
39022	10 x 10	10
39023	12,5 x 12,5	10
39024	10 x 20	5
39025	15 x 15	5

Tips voor het aanbrengen

Raadpleeg voor gebruik het document "Gebruiksaanwijzing" dat bij het product is geleverd.

1. Zorg ervoor dat de huid schoon en **droog** is.
2. Wees u ervan **bewust** dat het gebruik van crèmes, lotions, zalf of huidpreparaten het vermogen van siliconen om zich aan de huid te hechten kan verminderen. Indien een dergelijk product wordt gebruikt, laat de huid rond de wond dan drogen voordat u het product aanbrengt.
3. Wanneer u klaar bent om Biatain Silicone Non-Border aan te brengen, verwijder dan eerst de middelste beschermfolie en breng aan op het wondgebied. Raak de kleefzijde van het schuimkussen niet aan. **Strijk** vervolgens het verband **glad** langs de huid terwijl u de resterende beschermfolie verwijdert. Indien nodig kan het verband worden bijgeknipt zodat het op moeilijke plaatsen kan worden aangebracht.
4. Pas **fixatie** toe volgens het protocol van uw instelling, en compressietherapie indien klinisch aangewezen.
5. **Laat** het verband op zijn plaats om de wondgenezing niet te verstoren. Verwissel het product wanneer klinisch aangewezen of volgens het protocol van uw instelling.
6. **Vervang** het verband wanneer zichtbare tekenen van exsudaat de rand van het schuim naderen.



Grote teen of duim



Grote teen of duim




Voor wonden aan de grote teen.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 10 cm.

Plooi het product en knip er een driehoekige vorm uit. Breng het product aan tussen de grote teen en de tweede teen en vouw het rond de grote teen alvorens het te fixeren met geschikt secundair verband. Voor de duim kan een soortgelijke methode gebruikt worden.

Hoe te knippen:

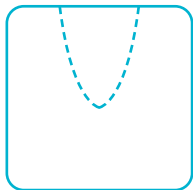


Scan de code voor
een video over hoe
te knippen

Voor wonden aan de grote teen.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 10 cm.

Knip twee hoekjes van het product af en breng het product aan vanaf de binnenzijde van de grote teen alvorens het te fixeren met geschikt secundair verband. Voor de duim kan een soortgelijke methode gebruikt worden.

Hoe te knippen:

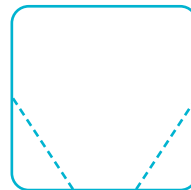

Scan de code voor
een video over hoe
te knippen

Tenen



Tussen de tenen




Voor wondjes aan het topje van een teen.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 10 cm.

Knip het product in de vorm van een kruis. Hou voor een optimale vorm rekening met de grootte van de teen en de afmetingen van het geknipte product. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

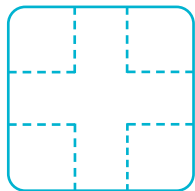


Scan de code voor een video over hoe te knippen

Voor wonden tussen de tenen.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 7,5 x 7,5 cm.

Knip het product in de vorm van een kruis. Hou voor een optimale vorm rekening met de grootte van de tenen en de afmetingen van het geknipte product. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

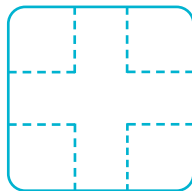

Scan de code voor een video over hoe te knippen

Tussen de tenen




Voor wonden tussen de tenen.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 5 x 7,5 cm.

Knip een afgeronde vorm aan beide kanten van het product. Rond voor een betere pasvorm eventueel ook de hoeken af. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

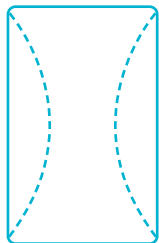

Scan de code voor een video over hoe te knippen

Tussen de tenen




Voor wonden tussen de tenen.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 12,5 x 12,5 cm.

Plooi het product en knip insnijdingen/gaatjes volgens het aantal te bedekken tenen. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

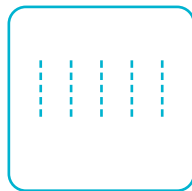

Scan de code voor een video over hoe te knippen

Tussen de tenen




Voor wonden tussen de tenen.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 12,5 x 12,5 cm.

Knip gaten volgens het aantal te bedekken tenen en verwijder restjes product. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

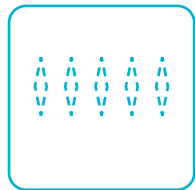

Scan de code voor een video over hoe te knippen

Malleolus (voet)




Voor wonden rond de malleolus op de voeten.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 7,5 x 7,5 cm.

Knip een afgeronde vorm zodat het verband rond de laterale malleolus van de voet past. Kan ook aangebracht worden rond de binnenste malleolus. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

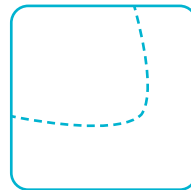

Scan de code voor een video over hoe te knippen

Hiel




Voor wonden aan de hiel.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 15 x 15 cm.

Knip het product in een vorm die geschikt is om op de hiel aan te brengen door twee driehoeken van een geschikte grootte af te knippen. Breng het bovenste bredere deel aan op de achillespees en vouw de onderste zijdelen om de hiel alvorens te fixeren met geschikt secundair verband. Als alternatief kunt u, indien beschikbaar, Biatain® Silicone Heel gebruiken.

Hoe te knippen:

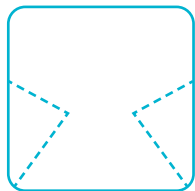

Scan de code voor een video over hoe te knippen

Knie



Voor wonden aan de knie.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 20 cm.

Knip het product in een vorm geschikt voor aanbrengen op de knie door twee driehoeken van een geschikte grootte af te knippen. Hou rekening met de beweeglijkheid van de knie, en dat het product moet blijven zitten in zowel flexie als extensie van de knie. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:



Scan de code voor een video over hoe te knippen

Vingers



Tussen de vingers




Voor wonden aan het topje van een vinger.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 7,5 x 7,5 cm.

Knip het product in de vorm van een kruis. Hou voor een optimale vorm rekening met de grootte van de vinger en de afmetingen van het geknipte product. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

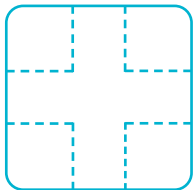


Scan de code voor een video over hoe te knippen

Voor wonden tussen de vingers.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 7,5 x 7,5 cm.

Knip het product in de vorm van een kruis. Hou voor een optimale vorm rekening met de grootte van de vingers en de afmetingen van het geknipte product. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

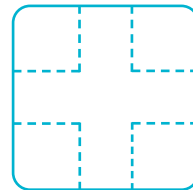

Scan de code voor een video over hoe te knippen

Tussen de vingers



Rond een vinger




Voor wonden tussen de vingers.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 5 x 7,5 cm.

Knip een afgeronde vorm aan beide kanten van het product. Rond voor een betere pasvorm eventueel ook de hoeken af. Breng aan tussen de vingers. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

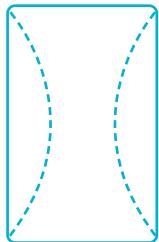


Scan de code voor een video over hoe te knippen

Voor wonden aan een vinger.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 5 x 7,5 cm.

Vouw het product aan de lange kant op ongeveer 1/3 en knip een gat in het product zodat de vinger erin past. Pas zo nodig de zijkanten van het product aan zodat het tussen de vingers past. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

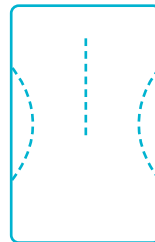

Scan de code voor een video over hoe te knippen

Palm van de hand




Voor wonden aan de handpalm.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 20 cm.

Vouw het product 1/3 naar beneden en knip gaatjes voor de drie middelste vingers. Verwijder de productrestjes en knip vervolgens een ronde insnijding die rond de basis van de duim past. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

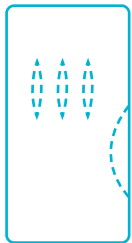

Scan de code voor een video over hoe te knippen

Palm van de hand



Voor wonden aan de handpalm.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 12,5 x 12,5 cm.

Knip in de rechterbovenhoek een gat van geschikte grootte voor de wijsvinger. Knip vervolgens zoals afgebeeld een afgeronde hoek af zodat het in de handpalm en de basis van de duim past. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:



Scan de code voor een video over hoe te knippen

Rug van de hand



Elleboog



Voor wonden aan de rug van de hand.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 12,5 x 12,5 cm.

Knip in de rechterbovenhoek een gat van geschikte grootte voor de wijsvinger. Knip dan een afgeronde hoek weg volgens de vorm van de rug van de hand. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:



Scan de code voor een video over hoe te knippen

Voor wonden aan de elleboog.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 20 cm.

Knip het product in een vorm geschikt voor aanbrengen op de elleboog door twee driehoekjes van geschikte grootte af te knippen. Hou rekening met de beweeglijkheid van de elleboog, en dat het verband zowel in volle flexie als extensie van de elleboog moet blijven zitten. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:



Scan de code voor een video over hoe te knippen

Schouder




Veelvormig



Voor wonden aan de schouder of andere hoekige zones.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 15 x 15 cm.

Knip aan weerszijden van het verband openingen, zodat het past over gewrichten zoals de schouder of andere gebogen zones van het lichaam waar een dergelijke aanpassing nodig is. Fixeer met geschikt secundair verband of tape.

Hoe te knippen:

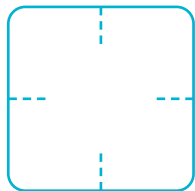


Scan de code voor
een video over hoe
te knippen

Voor wonden aan de schouder of andere hoekige zones.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 15 x 15 cm.

Knip aan weerszijden van het verband openingen uit, zodat het veelvormig wordt en past over gewrichten zoals de schouder of andere gebogen anatomische gebieden waar een dergelijke aanpassing nodig is.
Fixeer met geschikt secundair verband of tape. Gebruik als alternatief, indien beschikbaar Biatrain® Silicone Multishape.

Hoe te knippen:

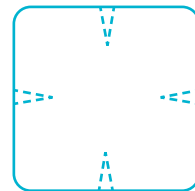

Scan de code voor
een video over hoe
te knippen

Oksel




Voor wonden aan de oksel.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 15 x 15 cm.

Knip een afgeronde hoek zodat het verband dicht aansluit aan de oksel. Fixeer met geschikt secundair verband of tape.

Hoe te knippen:

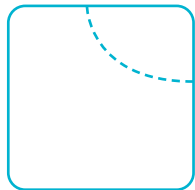

Scan de code voor
een video over hoe
te knippen

Onder borst




Voor wonden rond of onder de borst, bijv. na een operatie.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 20 cm.

Knip aan twee kanten van het product openingen zodat het onder de borst past. Relevant voor littekens na een borstoperatie. Fixeer met geschikt secundair verband of tape.

Hoe te knippen:

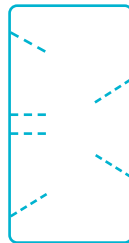

Scan de code voor
een video over hoe
te knippen

Keel




Voor wonden aan de keel en nek.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 20 cm.

Kies een rechthoekig formaat en knip openingen aan twee kanten van het product zodat het op de keel past. Plaats de kant met de twee geknipte openingen langs de sleutelbeenderen, en de andere kant met drie geknipte openingen onder het kaakbeen. Fixeer met geschikt secundair verband of tape.

Hoe te knippen:

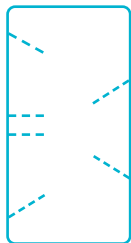

Scan de code voor een video over hoe te knippen

Oor




Voor wonden rond het oor.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 10 cm.

Knip het verband zo dat het rond de vorm van het oor past. Fixeer met een geschikt secundair verband of tape.

Hoe te knippen:

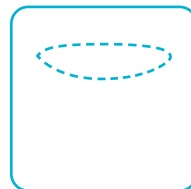

Scan de code voor een video over hoe te knippen

Achter het oor



Voor wonden achter het oor.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 10 cm.

Knip het verband zo dat het achter het oor past. Fixeer met een geschikt secundair verband of tape.

Hoe te knippen:



Scan de code voor een video over hoe te knippen

Notities

Coloplast ontwikkelt producten en diensten die het leven gemakkelijker maken voor mensen met zeer persoonlijke en gevoelige medische aandoeningen. We werken nauw samen met de mensen die onze producten gebruiken, en creëren oplossingen die rekening houden met hun speciale behoeften. We noemen dit intieme gezondheidszorg.

Onze bedrijf biedt onder meer Stomazorg, Continentiezorg, Wonden Huidverzorging, Interventionele Urologie en Stem- en Ademhalingszorg. We zijn wereldwijd actief en hebben ongeveer 12.500 werknemers in dienst.

Ostomy Care
Continence Care
Wound and Skin Care
Interventional Urology
Voice and Respiratory Care

Coloplast Belgium NV/SA, Guido Gezellestraat 121, 1654 Huizingen, België V.U. : E. Binnemans
www.coloplast.be Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.

© 2022-10. Alle rechten voorbehouden. PM-24225

340N30021N

