


SenSura[®] Mio Concave
Een oplossing voor ronde buiken

SenSura[®] Mio Concave



*"De pasvorm van
Sensura Mio
Concave past zo
goed bij mij dat ik
nooit aan mijn
stoma hoeft te
denken."*

SenSura[®] Mio Concave

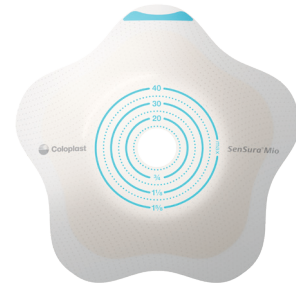

SenSura[®] Mio Concave met innovatieve stervormige huidplaat


Het concave stomamateriaal is ontwikkeld voor naar buiten gerichte peristomale zones. Het is geschikt voor stomadragers met allerlei rondingen, zoals:

- › Grote of ronde buiken
- › Obesitas
- › Buikrollen
- › Hernia's

De drie cruciale vereisten


Voor stomagebruikers met een naar buiten gerichte peristomale zone moet de huidplaat aan drie belangrijke eisen voldoen om een veilige en betrouwbare pasvorm te garanderen. Het SenSura[®] Mio Concave-gamma biedt ook de juiste oplossingen voor precies deze vereisten.

Uitdagingen

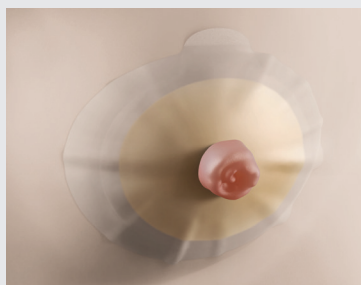


Geen plooien

Vlakke huidplaten passen niet op bollingen. De ontstane plooien sluiten niet volledig af en kunnen tot lekkage leiden.

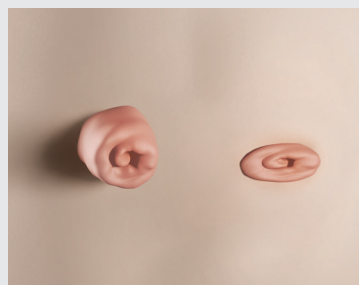

Stoma-ondersteuning

De stoma en de peristomale zone veranderen wanneer men beweegt – ongeacht of men staat, zit of ligt.

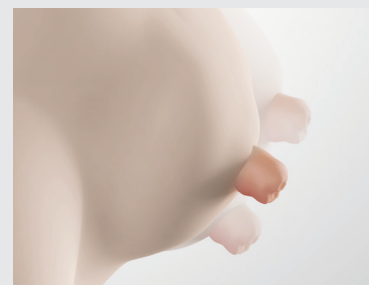

Veilige hechting

De naar buiten gerichte peristomale zone beweegt bijzonder mee en heeft daarvoor een extra stevige grip nodig.




Oplossingen



Stervormige huidplaat met afgeronde uiteinden

De uiteinden van de huidplaat, in de vorm van een ster, passen zich aan de rondingen aan zonder te rimpelen.

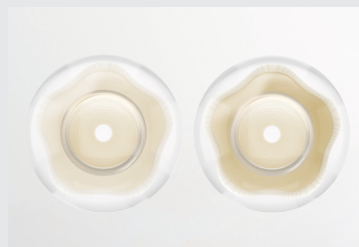

Stabiliteitsring en stabiliteitszone

Ze bieden de nodige stabiliteit met gelijktijdige flexibiliteit wanneer de vorm van de stoma verandert als gevolg van bewegingen.



Flex-zones en elastische huidplaat

Ze zorgen voor een optimale aanpassing aan de naar buiten gerichte lichaamsvorm tijdens lichaamsbewegingen.

De stervormige huidplaat




De stervormige huidplaat met BodyFit Technology® vergroot het contactoppervlak tussen de huidplaat en de peristomale huid, voor een optimale hechting van het stomamateriaal op naar buiten gerichte peristomale zones.

Uiteinden

Ze vormen zich naar de rondingen zonder plooien te veroorzaken.

Stabiliteitsring

Verstevigt de binnenzone rond de stoma en dient als geleider bij het bevestigen van de huidplaat.

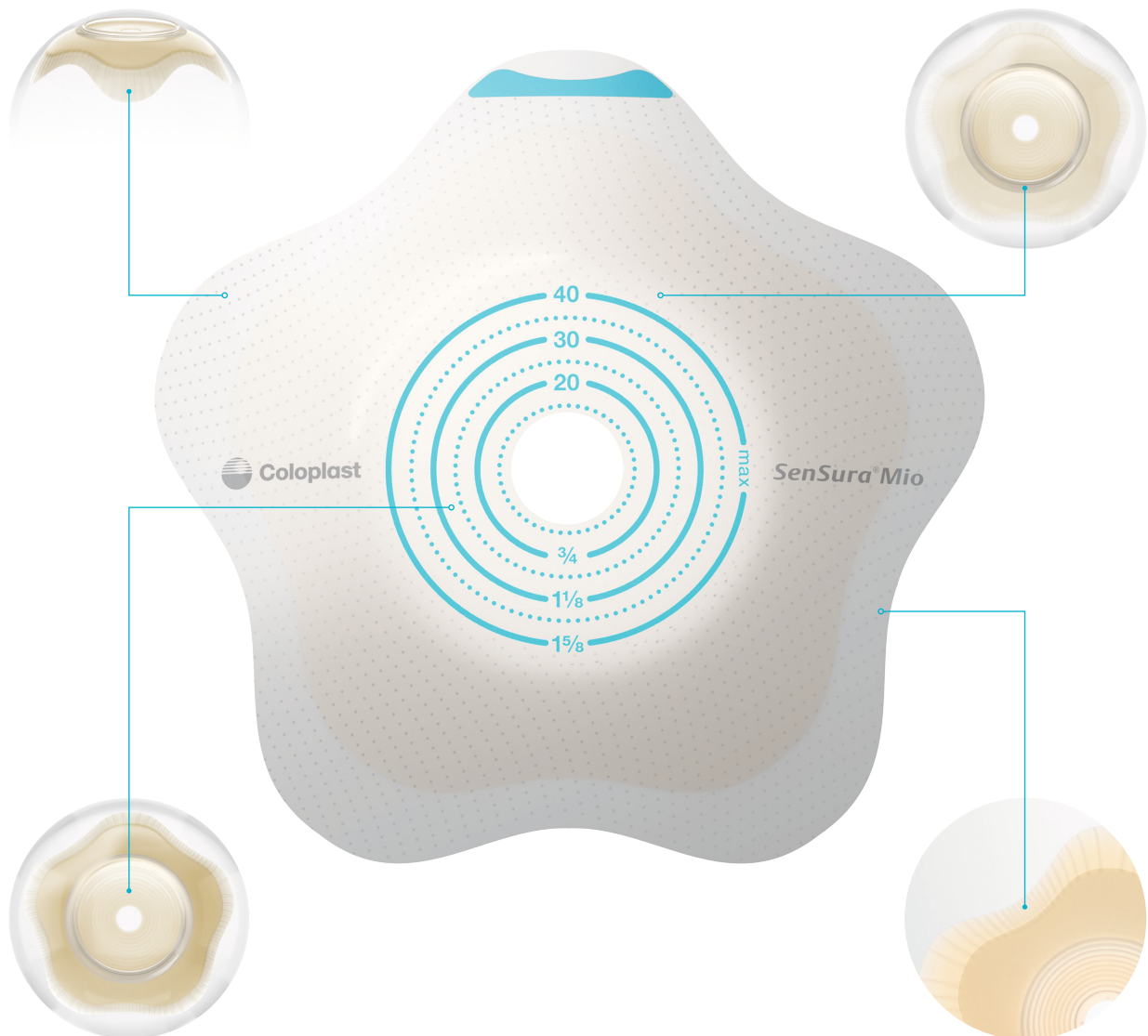

Stabiliteitszone

Het reliëf zorgt voor een goede pasvorm en biedt de nodige flexibiliteit zonder aan stabiliteit in te boeten.


Flex-zones

Zij verhogen de elasticiteit en het aanpassingsvermogen van de huidplaat bij elke beweging.


Flip-in-Form systeem



SenSura® Mio Concave

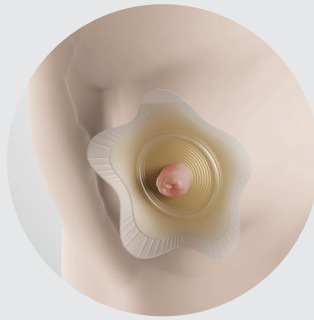

Het middenste gedeelte
aanbrengen

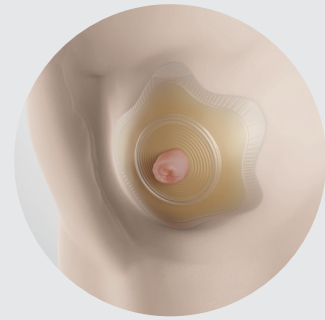

Eenvoudigweg omklappen.
En klaar.

Met het Flip-in-Form systeem kan de huidplaat gemakkelijk en veilig worden aangebracht en vervolgens op haar plaats worden bevestigd door de uiteinden eenvoudigweg "om te klappen".


SenSura® Mio Concave – voor alle stomatypes

Past op alle stomatypes die een concave pasvorm vereisen:
Colo - Ileo - Uro. Verkrijgbaar in eendelig of tweedelig opvangsysteem.


Colostomazakje



Ileostomazakje

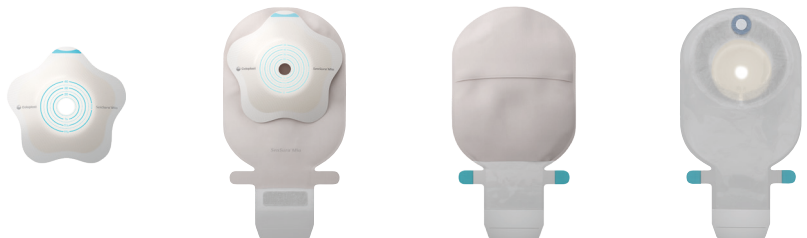

Urostomazakje

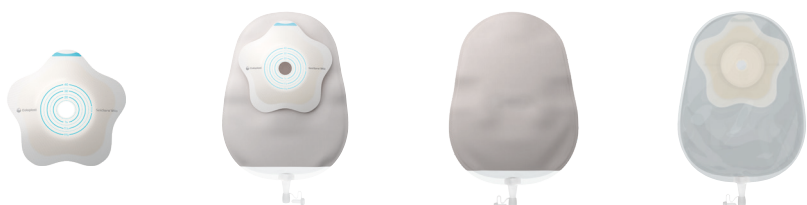

BodyFit Technology® – verzekert de juiste pasvorm

BodyFit Technology® is een technologie voor huidplaten die de vormen en bewegingen van het lichaam volgt.

De elastische huidplaat met BodyFit Technology® vormt de basis voor alle SenSura® Mio-huidplaten. Ze zorgt voor een goed afgestemde pasvorm op het lichaam.

Elastisch en aanpassend


- Volgt de bewegingen van het lichaam om altijd een goede pasvorm te verzekeren.
- Geeft mee met de huid - zelfs bij volledig uitrekken.
- Neemt opnieuw zijn oorspronkelijke grootte en vorm aan.

Buigzaam en flexibel

- Past zich aan de individuele lichaamscontouren aan. Dit zorgt voor een goede pasvorm, ook voor personen met een hernia, littekens en huidplooiën.
- Volgt de lichaamscontouren, ook bij bukken of buigen.

SenSura® Mio – geschikt voor elke lichaamsvorm

Egaal, in kuil of bolvormig - SenSura® Mio is een innovatief gamma dat voor elke peristomale zone of buik het juiste product biedt, rekening houdend met de positie van de stoma:

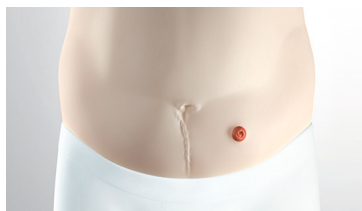

Egale peristomale zones
(ca. 50 % van de stomadragers)¹



Peristomale zones in kuil
(ca. 15 % van de stomadragers)¹




Bolvormige peristomale zones
(ca. 35 % van de stomadragers)¹



SenSura® Mio Vlak



SenSura® Mio Convex

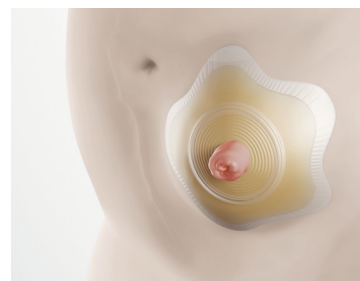

SenSura® Mio Concave

Resultaat: een veilige pasvorm voor elk lichaam

De SenSura[®] Mio – huidplaat

Dubbellagige huidplaat
biedt een tweeledige
bescherming.


1. Bovenlaag

verzekert een goede hechting
van de plaat en een goede
pasvorm op het lichaam.

2. Onderlaag


beschermt de huid, zorgt voor
een goede afdichting en helpt de
pH van de huid op peil te
houden.

De twee lagen vormen één
geheel – de **SenSura Mio-
huidplaat**.

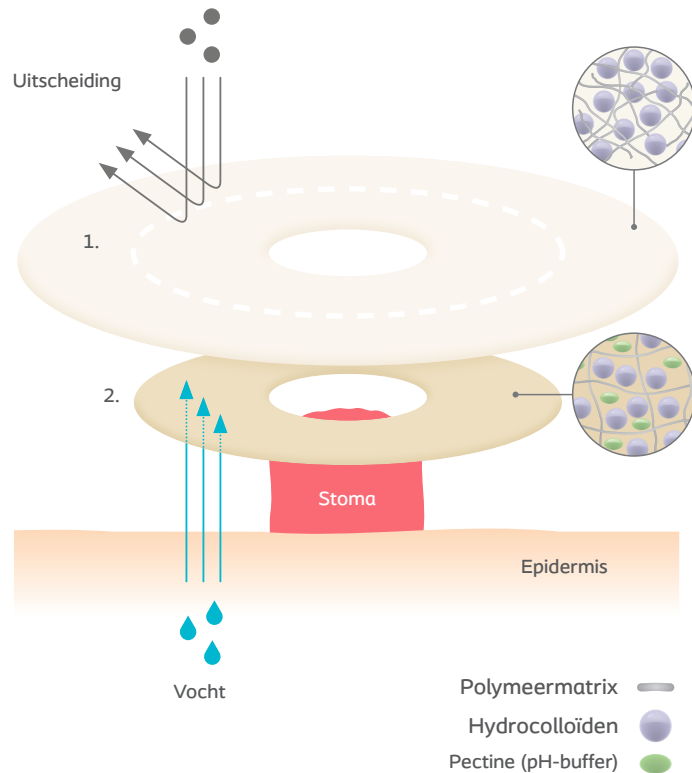

Overtuigende eigenschappen voor tevreden gebruikers

SenSura® Mio Concave biedt een verbeterde levenskwaliteit dankzij de speciale vorm en geavanceerde functies.

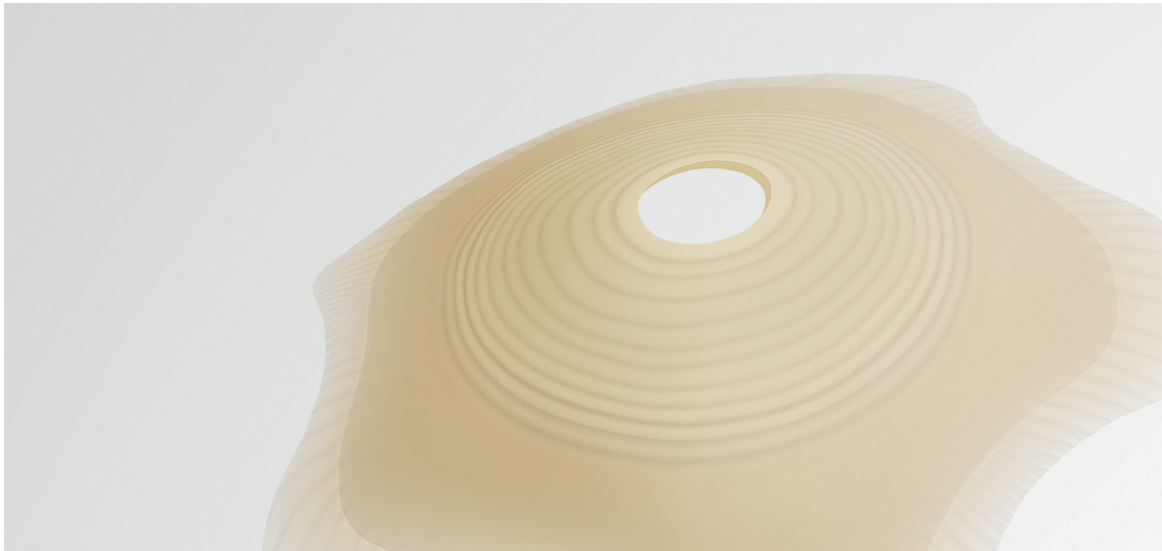

Lichtgrijs textiel

De lichtgrijze textielstof is comfortabel om dragen en nauwelijks zichtbaar, zelfs niet onder witte kleding.



Doeltreffende cirkelfilter


Samen met de geïntegreerde, cirkelvormige pre-filter wordt het opblazen van het zakje verminderd.



Flexibele klikkoppeling

Met een duidelijk hoorbare klik geeft het de drager een nog sterker gevoel van veiligheid.




A middle-aged man with glasses, wearing a green polo shirt under a black jacket, stands on a city street at night. He is smiling broadly and gesturing with his right hand. The background is filled with blurred city lights and neon signs, creating a bokeh effect. The overall mood is positive and relaxed.

"Het geeft me een innerlijke rust. Het zakje doet zijn ding en ik doe het mijne."

De juiste maat voor iedereen

De SenSura® Mio Concave huidplaten zijn verkrijgbaar in 4 verschillende maten om aan individuele eisen te voldoen.

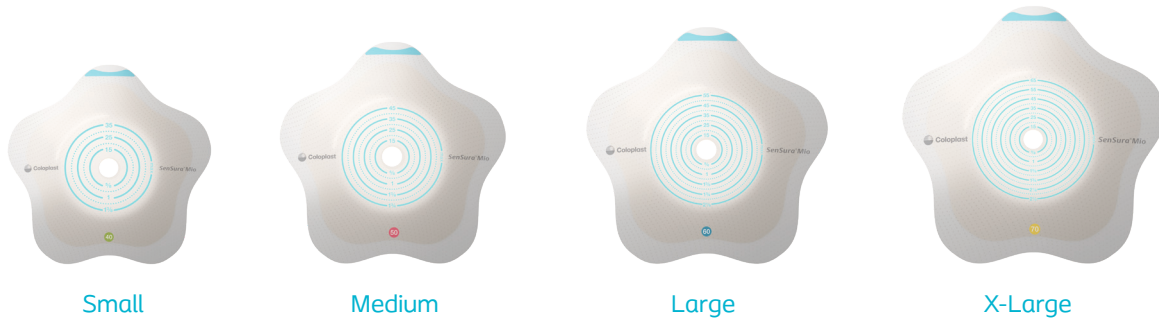

De keuze van de geschikte maat is gebaseerd op de stomadiameter.

Advies: Indien het om twee maten gaat, gelieve eerst de kleinste plaatgrootte te kiezen.



Assortiment

SenSura[®] Mio Concave

SenSura[®] Mio Concave (1-delig systeem)

Gesloten zakje met controlevenster, *doorschijnend



Artikelnr.	Zakgrootte/volume	Plaatgrootte	Stomamaat ø in mm	Stuks / doos	CNK-code
18151	midi (327 ml)	S	10 – 40 mm	10	4421-814
18152	maxi (455 ml)	S	10 – 40 mm	10	4421-822
18160	midi (327 ml)	M	10 – 50 mm	10	4421-830
18170	maxi (455 ml)	M	10 – 50 mm	10	4421-848
18180	maxi (455 ml)	L	10 – 60 mm	10	4421-855
18185*	maxi (455 ml)	L	10 – 60 mm	10	4421-863

Opvangzakje met Hide-away[®]-sluiting met controlevenster, *doorschijnend



Artikelnr.	Zakgrootte/volume	Plaatgrootte	Stomamaat ø in mm	Stuks / doos	CNK-code
18251	midi (342 ml)	S	10 – 40 mm	10	4421-871
18252	maxi (470 ml)	S	10 – 40 mm	10	4421-889
18260	midi (342 ml)	M	10 – 50 mm	10	4421-897
18270	maxi (470 ml)	M	10 – 50 mm	10	4421-905
18280	maxi (470 ml)	L	10 – 60 mm	10	4421-913
18285*	maxi (470 ml)	L	10 – 60 mm	10	4421-921

Urozakje met verdeelkamers, ondoorschijnend, *doorschijnend



Artikelnr.	Zakgrootte/volume	Plaatgrootte	Stomamaat ø in mm	Stuks / doos	CNK-code
18401	maxi (381 ml)	S	10 – 40 mm	10	4421-939
18405*	maxi (381 ml)	S	10 – 40 mm	10	4421-947

SenSura[®] Mio Concave Click Huidplaat met bevestigingssoogjes voor een gordel (2-delig systeem) (combineerbaar met de bestaande SenSura[®] Mio 2-delige opvangzakjes)



Artikelnr.	Borgring ø in mm	Plaatgrootte	Stomamaat ø in mm	Stuks / doos	CNK-code
18500	40 mm	S	10 – 35 mm	5	4421-954
18510	50 mm	M	10 – 45 mm	5	4421-962
18520	60 mm	L	10 – 55 mm	5	4421-970
18530	70 mm	XL	10 – 65 mm	5	4421-988

Coloplast ontwikkelt producten en diensten die het leven van mensen met zeer persoonlijke medische aandoeningen vergemakkelijken. Door nauw samen te werken met de mensen die onze producten gebruiken, ontwikkelen we oplossingen die op hun bijzondere behoeften afgestemd zijn. Dit noemen we intieme gezondheidszorg.

We bieden oplossingen voor stomazorg, continenzorg, wond- en huidzorg en urologiezorg. We zijn wereldwijd actief en tellen meer dan 10.000 werknemers.